

# BluLine

serie **KFT**

**Frigoriferi e Congelatori Trasportabili**



APPARECCHI SCIENTIFICI

**KW**<sup>®</sup>



# serie KFT

## Frigoriferi e Congelatori Trasportabili

La linea **KFT** è l'offerta di KW per la refrigerazione mobile. La refrigerazione è meccanica, con impiego di compressori ermetici e possibilità di alimentazioni sia per impiego in laboratorio, che su mezzo mobile.

### STRUTTURA

- Struttura del mobile interamente in plastica antiurto
- Due maniglie o due prese a scomparsa per il trasporto
- Cestello interno, estraibile nel modello **KFT50A**
- Isolamento senza CFC e HCFC con spessore 60 mm.
- Chiusura con chiave (solo per Mod. **KFT50A**)

### IMPIANTO

Compressore ermetico silenzioso, con consumo ridottissimo e con refrigerante ecologico HFC.

Trasformatore 220V/12V/24V incorporato nei mod. **KFT32A** e **KFT50A** (per funzionamento sia in laboratorio V220/HZ50, che su mezzo mobile V12/V24 C.C.)

**TERMOREGOLAZIONE**, con termoregolatore elettronico digitale a microprocessore, esterno al vano, con display a leds, per la regolazione, la visualizzazione ed il controllo della temperatura interna.

### ACCESSORI

- **Allarme di temperatura minima e massima**

(per Mod. **KFT50A**).

- **Sistema di registrazione della temperatura con DATA LOGGER**, per il funzionamento senza uso di sonde esterne e privo di collegamenti di qualsiasi genere. Il dispositivo è una scatoletta di dimensioni mm. 70x58x35, completamente stagna, entro la quale sono alloggiati il sensore di temperatura, tutta l'elettronica necessaria, la batteria al litio a lunga durata (precisione di lettura ca. 0,1°C). A corredo viene fornita una base completa di software per il collegamento del dispositivo portatile con il PC; così facendo sarà possibile impostare i parametri di registrazione in modo personalizzato e scaricare tutti i dati registrati, sviluppando tabelle o diagrammi da stampare, per la completa rintracciabilità dei dati, così come richiesto dalle procedure di Qualità.


**Su questa serie di apparecchiature è possibile svolgere attività di I. Q. (Installation Qualification) e di O. Q. (Operational Qualification); per una valutazione dei costi di tali attività, rivolgersi all'Ufficio commerciale KW.**

### frigocongelatori KFT

Modello	Misure esterne (lpxh)	Misure interne (lpxh)	Capacità	Campo di regolazione	Alimentazione	Potenza media assorbita in KW	Peso	Gas refrigerante
KFT 32A	cm. 35x58x38 h	cm. 31x26x22 h	litri 32	-16°C +5°C	12V/24V/220V	0,13	Kg. 23	R134-a
KFT 50A	cm. 77,5x45x48h	cm. 40x37,5x33 h	litri 50	-20°C +10°C	12V/24V/220V	0,13	Kg. 25	R134-a



**KFT 32A**

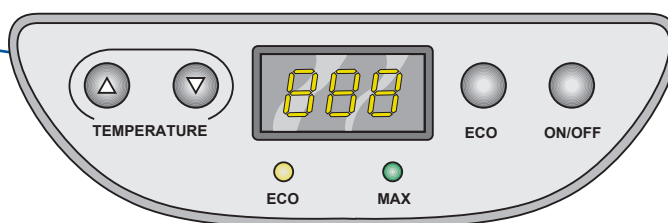

#### Contatti:

Direzione generale: [management@kwkw.it](mailto:management@kwkw.it)  
Responsabile ufficio tecnico di produzione: [technician@kwkw.it](mailto:technician@kwkw.it)  
Responsabile ufficio commerciale: [sales@kwkw.it](mailto:sales@kwkw.it)  
Ufficio Commerciale gare: [commerciale@kwkw.it](mailto:commerciale@kwkw.it)  
Export: [expdpt@kwkw.it](mailto:expdpt@kwkw.it)  
Assistenza tecnica e ricambi: [assistenza@kwkw.it](mailto:assistenza@kwkw.it)  
Service line: [service@kwkw.it](mailto:service@kwkw.it)  
Ufficio logistica e spedizioni: [delivery@kwkw.it](mailto:delivery@kwkw.it)  
Amministrazione: [administration@kwkw.it](mailto:administration@kwkw.it)

APPARECCHI SCIENTIFICI

**KW**




- La bassa temperatura
- Sapere di cosa si parla
- serie **K.130 A - K.130 C** congelatori -125°C
- serie **HS** congelatori -85°C
- serie **HS** Accessori contenitori ed accessori d'uso per congelatori
- serie **HS** particolari
- serie **HSL** congelatori -40°C
- legenda - serie **HS HSL PL PLL** congelatori -85°C -40°C
- serie **Premium Line KW** congelatori a bassissima temperatura -85°C
- serie **Premium Line KW** modelli **PL/2D** (doppia porta)
- serie **Premium Line KW** modelli **Banche Biologiche PL/S** Banca biologica® è un marchio registrato KW di esclusiva produzione KW
- serie **Premium Line KW** congelatori a bassissima temperatura -40°/-50°C modelli **K40...PLL**
- serie **Premium Line KW** modelli **Banche® K40...PLL/S** di esclusiva produzione KW
- serie **Premium Line KW** -accessori
- serie **Premium Line KW** Tastiera
- **Contentori** accessori d'uso per congelatori
- serie **K Biological & Pharmacy Freezer Power Plus KBPF-PP** congelatori verticali -40°C
- serie **K Freezelab Super S KFS\_NIA** congelatori verticali -30°C
- serie **KW Frig** congelatori orizzontali e verticali -30°C -40°C
- serie **K Refrilab Elite** frigoriferi verticali 0°C +10°C
- serie **K Freezelab Elite / Super** congelatori verticali -20°C / -30°C

- serie **KFDE** congelatori verticali -20°C -30°C linea Elite
- serie **KFDS** congelatori verticali -20°C -30°C linea Standard
- serie **KFDC** congelatori verticali -20°C -30°C linea Economica
- serie **KFCE** congelatori orizzontali -20°C -30°C linea Elite
- serie **KFCS** congelatori orizzontali -20°C -30°C linea Standard
- serie **KRFDE** frigo - congelatori verticali +4°C -20°C linea Elite
- serie **KRFDS** frigo - congelatori verticali +4°C -20°C linea Standard
- serie **KRFDC** frigo - congelatori verticali +4°C -20°C linea Economica
- serie **KLAB** frigoriferi, frigocongelatori, congelatori -20°C Il sistema di controllo
- serie **KLAB** frigoriferi, frigocongelatori, congelatori -20°C La struttura
- serie **KLAB** frigoriferi, frigocongelatori, congelatori -20°C L'impianto di refrigerazione
- serie **K-LAB freezers** congelatori verticali -20°C
- serie **K-LAB dual temp** frigocongelatori verticali +4°C / -20°C
- serie **K-LAB refrigerators** frigoriferi verticali +4°C
- serie **K-LAB 2T** frigoriferi verticali due temperature
- serie **K-LAB CR refrigerators** frigoriferi verticali per cromatografia +4°C
- serie **K-LAB Atvanguard line** frigoriferi e congelatori -20°C
- serie **K-LAB TG (Twin Group)** frigoriferi frigocongelatori congelatori -20°C "con doppi impianti"

- serie **K-LAB prefabbricati** frigoriferi e congelatori verticali di grande volume
- serie **Camere Fredde** +4°C -20°C
- serie **K BSR** - Medical Project Frigoriferi BIO(logical) PHARMA(cy) & BLOOD BANK REFRIGERATORS serie STANDARD
- serie **K BPR** - Medical Project Frigoriferi BIOLOGICI serie Farmaci
- serie **PHARMACY REFRIGERATORS** Medical Project mod. **KBPR 400V2T** a due temperature con compressori indipendenti
- serie **K BBR** - Medical Project Frigoriferi EMOTECHE serie SANGUE
- serie **K BPF** - Medical Project Congelatori BIOLOGICI -20°C serie Farmaci
- serie **KFT** Frigoriferi e Congelatori Trasportabili
- serie **Frigo Portatile ALCATHERM** con refrigerazione autonoma
- serie **Contentore Isoterma FREETHERM** trasporto autonomo e regolazione nella conservazione dei prodotti congelati
- serie **Roll Auto Refrigerata** produzione di freddo autonoma istantanea e regolata
- serie **IFM** produttori di ghiaccio in scaglie
- serie **ICM** produttori di ghiaccio in cubetti
- **SLC** (Sistema di Controllo "Silver Line Control")
- **NIA** (Sistema di Controllo "New Ice Age Control")
- **ColdMaster** Software di gestione e visualizzazione dati per frigoriferi e congelatori linea KLAB
- **Web NIA Server (WNS)** Sistema per la supervisione in rete web di unità refrigerate con controllori

 = Allarme temperatura min. / max

 = Luce interna

 = Funzione DATA LOG


 = Allarme guasto energia

 = Allarme sonda guasta

 = Allarme porta aperta

 = Serratura

 = Disaster Recovery / Safety Control

 = Registratore grafico di temperatura

 = Ruote